

Manual de Usuario



Información General

Manual:



Este manual de operaciones ayuda a trabajar apropiadamente con la cámara diagnóstica Wi-Fi. Por favor guarde este manual para su información.

No nos responsabilizamos por cualquier daño causado si no se ha seguido las instrucciones de la guía de uso y de este manual apropiadamente.

Mantenimiento:



Para limpiar este dispositivo, use un paño húmedo o suave, un limpiador a base de agua.

La batería debe estar completamente cargada antes de que deje el dispositivo sin utilizar por largos períodos de tiempo para prevenir daños a la batería.

Almacenamiento y transporte:



Un transporte inapropiado, puede dañar el dispositivo. Siempre transportarlo en su caja para prevenir daños.

Información de desechos:




El equipamiento electrónico no debe ser arrojado en la basura doméstica, sino debe ser tratado de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Descripción

Este nueva cámara diagnóstica Wi-Fi portátil, ergonómica y práctica para inspección de oreja. El conducto interno auditivo puede ser visto por la cámara de forma clara en su teléfono, y puede ser muy útil para analizar su salud auditiva. Las imágenes JPG y videos AVI pueden ser almacenados en la aplicación.

— 01 —

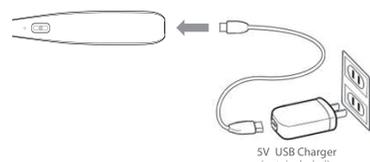

Technical Data

Descripción	Datos
Modelo	WFE300
Resolución cámara	640*480 30fps 1280*720P 15fps
Resolución lente	100W/720P
Voltaje cámara	3.3V
Longitud focal	15MM
Áng. vista horizontal	70°
Intensidad cámara	150MAH*3.3V=0.5W
Intensidad equipo	260MAH*4.2V=1.1W
Capacidad batería	360MAH
Tiempo de trabajo	60-75Min
Corriente de carga	330MAH

— 05 —

Si esta usando este dispositivo de forma doméstica y llegase a existir alguna irritación en la oreja, no dude en consultar a su doctor.

Precauciones

- ⚠ Mantenga el dispositivo seco, limpio, libre de aceite, agua, gas u otro material que pueda causar corrosión.
- ⚠ Este dispositivo no es apto para el uso de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales.
- ⚠ Mantenga a los espectadores lejos mientras se opera el dispositivo.
- ⚠ No se sobrepase al introducir el dispositivo en cavidades y mantenga el equilibrio y balance adecuado todo el tiempo.

Funcionamiento



Indicador LED
Pulsación larga - Encendido ON/OFF
Pulsación corta - Ajuste

Puerto de carga Micro USB

— 02 —

Precauciones

Mientras opera su equipo:

- ⚠ **ADVERTENCIA:** No diseñado para uso en ambientes inflamables o explosivos.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No utilizar este equipo con ningún recubrimiento (incluyendo engastes, paneles o cubiertas)
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No usar este equipo en un ambiente húmedo. Proteger el equipo ante la intrusión de líquidos.
- No usar el equipo con cables dañados, deshilachados o expuestos.
- Desconectar su dispositivo y periféricos de cualquier conexión eléctrica de pared, cuando existen tormentas eléctricas o cuando se mantenga por fuera durante largos periodos de tiempo.
- No intente reparar el equipo usted mismo.
- Contáctenos si su equipo no opera normalmente.

Precauciones de Energía

Quando conectar su equipo a la fuente de energía:

- Revisar el nivel de voltaje antes de conectar el dispositivo a una toma eléctrica.
- Usa solo adaptadores eléctricos aprobados para usarse con este dispositivo.
- Colocar su adaptador AC en un lugar ventilado, como un escritorio o en el piso, cuando lo use para cargar la batería.
- El adaptador AC puede calentarse mientras se carga el dispositivo

— 06 —

¿Cómo usar el Otoscopio Wi-Fi?

Paso 1:

Dirigase a Apple Store o Google Play Store para descargar "DEPSTECH" app para iOS o "DEPSTECH-Wi-Fi" para



Paso 2:

Pulse alargadamente el botón plástico y la luz LED blanca y azul del botón se mantendrán estáticas.

Paso 3:

Vaya a la lista Wi-Fi de las configuraciones de su teléfono y conecte el Wi-Fi llamado "WFE300_*****" ingresando la contraseña "12345678"

Por favor tome en cuenta que los caracteres "*" de este paso, son realmente una serie de números y letras aleatorios reemplazándolos.



Paso 4:

Después de conectarse, por favor abra la aplicación preinstalada "DEPSTECH" o "DEPSTECH-Wi-Fi". Si la conexión es exitosa, la luz azul estará parpadeante y la imagen será transmitida.

— 03 —

Uso de la aplicación:



1 Cambiar la resolución de la cámara:

1. Ingresar a configuraciones;
2. Seleccionar la resolución;
3. Click en "Set Resolution"

640 × 480

1280 × 720

Carga de la batería

- ⚠ El tiempo de carga es de al menos 90 minutos con la luz verde en modo carga. Cuando la luz verde se apague, la carga esta lista.

— 04 —

Solución a problemas

* No hay despliegue de imagen o existe ruido en la imagen

- Revise las configuraciones Wi-Fi en su Smartphone, asegúrese de que esta conectado al dispositivo.
- Desconecte y vuelva a conectar el Otoscopio Wi-Fi
- Cierre la aplicación y vuélvala a abrir.
- Revise el nivel de batería, recargue la batería.

* Luces LED están parpadeantes u oscuras

- Batería baja

* Olvidó la contraseña

- Reinicie el equipo. Para ello, una vez encendido el Otoscopio Wi-Fi, presione alargadamente el botón por varios segundos hasta que la luz azul parpadee tres veces.

— 07 —